

# Rampen



## Teleskoprampen mit Tragegriff

Hersteller: Lehmann

Spurbreite: 19 cm

Rampenbreite: 25 cm

Seitenhöhe: 4,5 - 6 cm



Längenangaben incl. 10 cm Auflagenlänge

Bitte beachten Sie die Hinweise zur benötigten Rampenlänge auf der anderen Seite!

Modell: TR130 9 kg/Paar Länge: 80 - 137 cm Preis: 390.- €

Modell: TR195 13 kg/Paar Länge: 110 - 198 cm Preis: 470.- €

Modell: TR310 22 kg/Paar Länge: 170 - 318 cm Preis: 690.- €

Das Schieben eines Rollstuhls auf längeren oder sehr steilen Teleskoprampen ist sehr schwierig bzw. nicht möglich. Dies gilt ebenso für die Nutzung eines Rollators, da ein sicheres Gehen und Schieben zwischen den Schienen noch breitbeiniges Gehen auf den Schienen mit dem Hilfsmittel in zunehmender Höhe möglich ist.

HMV: 22.50.01.0055



## Vollflächenrampen

Hersteller: Lehmann

nach individueller  
Anfertigung

keine Leistung der  
Krankenkassen

Ausführungen z.B.: mit oder ohne Auf- bzw. Abkantung, mit oder ohne Auflagefläche, mit oder ohne Geländer.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, damit wir Sie vor Ort beraten und die für Sie beste Lösung finden können.

Gerne erstellen wir für Sie einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

## Vollgummirampe

Hersteller: Mobilex



Die Rampen bestehen aus Gummi (TPE), sind PVC-frei und haben eine selbstklebende Unterseite



Länge ist 90cm und muss entsprechend der Türbreite gekürzt werden

Höhe x Breite

0,4 x 4 cm 14,90 €

0,6 x 6 cm 24,90 €

0,8 x 8 cm 29,90 €

1,0 x 10 cm 34,90 €


1,2 x 12 cm 39,90 €

1,6 x 15 cm 49,90 €

2,0 x 15 cm 64,90 €

2,4 x 15 cm 84,90 €

2,8 x 20 cm 99,90 €

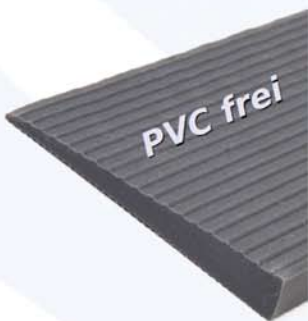

keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse

Bei höheren Türschwellen beraten wir Sie gerne vor Ort welche individuellen Alurampen für Sie am besten sind.

Gerne erstellen wir Ihnen dann einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

# Türschwellenrampen

## Wie lang muss die Rampe sein?

An öffentlichen Gebäuden gelten bestimmte DIN-Normen unter anderem max. 6% Steigung.

Da der Platz an Privathäusern meist nicht ausreicht können Sie sich an folgenden Werten für die max. Steigung orientieren:

Rollstuhl Selbstfahrer (manuell): 6%

Rollstuhl kräftiger Selbstfahrer (manuell): 7-10%

Rollatorfahrer: bis max. 12%

Rollstuhl wird von schwacher Person geschoben: bis max. 12%

Rollstuhl wird von kräftiger Person geschoben: 13-19%

Elektroantrieb: bis 20%

Beachten Sie dazu auch die Gebrauchsanweisung Ihres Hilfsmittels. Sie sollten an beiden Enden der Rampe Platz haben das Hilfsmittel abzustellen bzw. zu wenden.

Steigungen über 20% sind ein Sicherheitsrisiko, auf Grund der sehr hohen Kippgefahr bzw. durch das Aufsetzen der Fußstützen.

max. Höhe bei einer Steigung von 6%	max. Höhe bei einer Steigung von 12%	max. Höhe bei einer Steigung von 20%	Rampenlänge
2 cm	4 cm	6 cm	30 cm
3 cm	6 cm	10 cm	50 cm
4 cm	8 cm	14 cm	70 cm
5 cm	11 cm	18 cm	90 cm
7 cm	13 cm	22 cm	110 cm
8 cm	16 cm	26 cm	130 cm
9 cm	18 cm	30 cm	150 cm
10 cm	20 cm	34 cm	170 cm
11 cm	23 cm	38 cm	190 cm
13 cm	25 cm	42 cm	210 cm
14 cm	28 cm	46 cm	230 cm
15 cm	30 cm	50 cm	250 cm
16 cm	32 cm	54 cm	270 cm
17 cm	35 cm	58 cm	290 cm
18 cm	36 cm	60 cm	300 cm
21 cm	42 cm	70 cm	350 cm
24 cm	48 cm	80 cm	400 cm
27 cm	54 cm	90 cm	450 cm
30 cm	60 cm	100 cm	500 cm
33 cm	66 cm	110 cm	550 cm
36 cm	72 cm	120 cm	600 cm

Für eine Stufe (meist 18cm) ergeben sich folgende Masse:

6% Steigung = Rampenlänge 300cm

12% Steigung = Rampenlänge 150cm

20% Steigung = Rampenlänge 90cm

# Rampenlänge

# Wenn der Platz für Rampen nicht reicht, können wir Sie auch zu Alternativen beraten:

## Treppensteiger:

Mobiler elektrischer Treppensteiger mit integrierter Sitzeinheit oder zum Ankuppeln an einen Rollstuhl.

Bedienperson ist nötig und hält das Gleichgewicht während ein Stempel den Nutzer auf Knopfdruck die Stufen auf- oder abwärts befördert.

z.B.: AAT - S-Max Sella



## Treppenlift:

An Ihre Treppe angepasster Treppenlift für innen oder aussen.

Der Nutzer kann die Treppen alleine überwinden, muss jedoch umsetzen und kann kein Hilfsmittel mitnehmen.

z.B.: Acorn Außenlift

## Hebebühne / Plattformlift:

Der Nutzer kann im Hilfsmittel auf die Plattform fahren und sitzenbleiben.

Treppen können mitsamt dem Hilfsmittel eigenständig überwunden werden.

z.B.: Lehmann



# Alternativen



# müller

## Orthopädietechnik

Zentrale Fürth Poppenreuth

Alte Reutstraße 117

90765 Fürth

Tel : 0911 / 979 460

Fax: 0911 / 979 4633

Filiale Nürnberg Süd

Allersberger Str. 85

Tel: 0911/ 469 358

Filiale Nürnberg Ost

Äußere Sulzbacher Str. 122

Tel: 0911 / 51 93 004

Filiale Nürnberg Erlerklinik

Kontumazgarten 19

Tel: 0911/ 89 19 69 83

Filiale Erlangen

Sedanstr. 2

Tel: 09131 / 978 990

Filiale Zirndorf

Im Pinderpark 7a

Tel: 0911 / 609 95 66

Filiale Ansbach

Oberhäuserstr. 53a

Tel: 0981 / 38 29



Sanitätshaus



Orthopädie-  
Schuhtechnik



Rehatechnik



Orthopädie-  
technik



Treppenlift



Barrierefreies  
Wohnen