

Badewannenlifter:

Steht mit Saugnäpfen auf dem Wannensboden. Auch bei Oberkörperinstabilität möglich, da mit Rückenlehne. Zum Baden in der Wanne. Funktioniert mit Akkus in der Handsteuerung und separatem Ladegerät. Fährt auf Knopfdruck hoch und runter und Verstellung der Rückenlehne ist in der untersten Position auch möglich. Erleichtert das Einsteigen, da man sich seitlich auf den Lifter setzt und im Sitzen die Beine über den Wannensrand heben kann während man sich an der Rückenlehne anlehnt. Lässt sich leicht in 2 Teile à ca. 5 kg zerlegen zum Herausnehmen und Reinigen. Passt in ca. 90% aller Wannen in Standardform. Sie verlieren ca. 6cm an Wannenlänge und ca. 10 - 15 cm an Wannenlänge. Belastbar bis 140 kg. HMV: 04.40.01.0054



Video

Drive Medical - Bellavita G2 Artikelnr.: 465100100

699.- € inkl. MwSt

Badewannenlifter aufblasbar:

Steht mit Saugnäpfen auf dem Wannensboden. Nicht bei Oberkörperinstabilität möglich, da ohne Rückenlehne. Zum Baden in der Wanne. Funktioniert mit Akkus in dem separatem Pumpaggregat und separatem Ladegerät. Fährt auf Knopfdruck rauf und runter. Erleichtert das Einsteigen, da man sich rückwärts auf den Lifter setzt und im Sitzen die Beine über den Wannensrand heben kann. Passt in ca. 90% aller Wannen in Standardform. Sie verlieren ca. 2 cm an Wannenlänge und nichts an Wannenlänge.



Video



Belastbar bis 150 kg.

Russka - Mangar Badewannenlifter Artikelnr.: 78095010

keine Kassenleistung

1299.- € inkl. MwSt



Zentrale Fürth Poppenreuth

Alte Reutstraße 117

90765 Fürth

Tel : 0911 / 979 460

Fax: 0911 / 979 4633

Filiale Nürnberg Süd

Allersberger Str. 85

Tel: 0911/ 469 358

Filiale Nürnberg Ost

Äußere Sulzbacher Str. 122

Tel: 0911 / 51 93 004

Filiale Nürnberg Erlerklinik

Kontumazgarten 19

Tel: 0911/ 89 19 69 83

Filiale Erlangen

Sedanstr. 2

Tel: 09131 / 978 990

Filiale Zirndorf

Im Pinderpark 7a

Tel: 0911 / 609 95 66



Sanitätshaus



Rehatechnik



Treppenlift



Orthopädie-Schuhtechnik



Orthopädietechnik



Barrierefreies Wohnen



Bad & WC Hilfen



Quelle: Sanivita

Badewannenbrett: HMV: 04.40.02.0032

Zum Auflegen auf den Badewannenrand. Zum Duschen in der Badewanne. Oberkörperstabilität notwendig. Erleichtert das Einsteigen, da man sich seitlich auf das Brett setzt und im Sitzen die Beine über den Wannensrand heben kann während man sich auch am wandseitigen Griff festhält. Außenlänge 73 cm. Innenverstellmaß 40 - 67 cm. Belastbar bis 150 kg.



Russka - Badebrett Basic 73 cm Artikelnr.: 78059100 **59,90 €** inkl. MwSt

Badewannendrehstuhl: HMV: 04.40.02.3010



Zum Auflegen auf den Badewannenrand. Zum Duschen in der Badewanne. Der Badewannensitz kann aufgrund der Arm- und Rückenlehne auch bei Oberkörperinstabilität verwendet werden. Der Einstieg wird dadurch erleichtert, weil man sich an den Armlehnen festhalten kann, während man sich rückwärts auf den Drehstuhl setzt. Nach Betätigung des Auslösehebels lässt sich der Sitz um 90° drehen, sodass man im Sitzen die Beine über den Wannensrand heben kann. Sitzbreite 40 cm. Außenmaß 70 - 84 cm. Belastbar bis 120 kg.


Dietz - Bano Artikelnr.: 000118 **299.- €** inkl. MwSt

Badewanneneinhängesitz mit / ohne Rückenlehne:

Zum Auflegen auf den Badewannenrand. Der Badewanneneinhängesitz kann, falls er mit Rückenlehne ausgestattet ist, auch bei Oberkörperinstabilität verwendet werden. Wir raten generell von diesem Hilfsmittel ab! Das Ein- / Aussteigen muss weiterhin im Stehen erfolgen, ohne dass der Einhängesitz dabei eine Hilfe bietet. Das Aufstehen wird auch nicht wesentlich erleichtert, da er dafür zu tief hängt. Um mit dem Sitz baden zu können, hängt er jedoch zu hoch und somit ist nur duschen möglich. Um zu duschen gibt es jedoch bessere Hilfsmittel. Sitzbreite 41 cm. - Gesamthöhe ohne Rückenl. 25,5 cm. Außenmaß 71,6 - 87,6 cm. - Einstellmaß innen 47,5 - 63,5 cm. Belastbar bis 120 kg.



Dietz - 9403-B mit Rückenlehne **184,45 €** inkl. MwSt
Dietz - 9403-A ohne Rückenlehne **141,61 €** inkl. MwSt
mit RL HMV: 04.40.02.2007 - ohne RL HMV: 04.40.02.1006

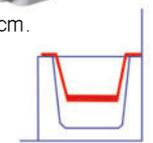

Badelifter

www.omueller.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten 09/23

Badewannenhilfen

Toilettenstuhl feststehend:

Feststehender Toilettenstuhl mit Eimer.
Sitzhöhe einstellbar 48 - 63,5 cm
Belastbar bis 130 kg.

Russka - Toilettenstuhl höhenverstellbar
Artikelnr.: 17500 540

HMV: 33.40.04.0019

159,- € inkl. MwSt



Toilettenstuhl fahrbar:

Mit Eimer und Fußstützen.
Außenbreite 57 cm.

Der Toilettenstuhl lässt sich, wenn man den Eimer entfernt, über die meisten WCs fahren. Bei Höhen des WCs bis 41 cm mit Halterung für den Eimer am Toilettenstuhl. (bis 45 cm wenn Sie die Eimerhalterung demontieren)
Bedienung der Bremse nur von hinten durch Begleitperson.
Aufgrund der Sitzhöhe von 49 cm kaum zum Selbstfahren geeignet.
Belastbar bis 120 kg.

Russka - Toilettenstuhl fahrbar
Artikelnr.: 17502 200

HMV: 18.46.02.0052

199,- € inkl. MwSt



Toilettensitzerhöhung:

Wird auf die Keramik aufgelegt und seitlich festgeklemmt. Entfernung der vorhandenen Deckel / Brille ist nicht notwendig. Erhöht das WC um 10 cm. Belastbar bis 200 kg.

Russka - Toilettensitzerhöhung 10 cm mit Deckel
Artikelnr.: 17525000

HMV: 33.40.01.0096

69,- € inkl. MwSt



Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen:

Nach Entfernung der vorhandenen Deckel / Brille wird die Toilettensitzerhöhung in den vorhandenen Löchern fest verschraubt. Lässt sich in drei Höhen einstellen 8, 12, 15 cm. Belastbar bis 120 kg.

Drive - TSE 120 plus mit AL - Artikelnr.: 520500500

HMV: 33.40.01.3034
120,- € inkl. MwSt
zzgl. Lieferung und Montage 75,- € inkl. MwSt



Badewanneneinsteigegriff:

Wird auf den Badewannenrand aufgesteckt und seitlich festgeklemmt. Klemmweite 8,5 - 13 cm. Erleichtert das Übersteigen des Wannenrandes. Aufrichten aus der Liegeposition ist damit nicht möglich. Nur von oben zu belasten. Belastbar bis ca. 100 kg.

Russka - Einsteigehilfe Deluxe Plus
Artikelnr.: 78072000

HMV: 04.40.05.0XXX
79,- € inkl. MwSt



Duschklapsitz:

Zum Kleben. Klebstoffreste können bei Demontage rückstandslos entfernt werden. Belastbar bis 130 kg.
Breite: 40 cm
Sitztiefe: 39 cm / Gesamttiefe: 44 cm
Sitzhöhe: 45 - 55 cm

Delficare - Varioporto Artikelnr.: 70000

HMV: 04.40.03.0035
259,- € inkl. MwSt

Montagepauschale für erstes Hilfsmittel: **75,- €** inkl. MwSt
inkl. Anfahrtpauschale, Rüstzeit, Montagematerial und Positionierung aller zu montierenden Hilfsmitteln.

Montage jedes weiteren Hilfsmittels: **20,- €** inkl. MwSt



Duschhocker mit Armlehnen

Die Dusche sollte min. 80 x 80 cm groß sein.

Sitzfläche: 30 x 49 cm
Stellfläche: 38 x 59 cm

Sitzhöhe: 39 - 53 cm
7-fach verstellbar

Belastbar bis 150 kg.

Russka - Laguna Duschhocker
Artikelnr.: 78700600

HMV: 04.40.03.1027

89,90 € inkl. MwSt



Duschstuhl:

Die Dusche sollte min. 80 x 80 cm groß sein.

Sitzfläche: 30 x 49 cm
Stellfläche: 38 x 59 cm

Sitzhöhe: 39 - 53 cm
7-fach verstellbar

Belastbar bis 150 kg.

Russka - Laguna Duschstuhl mit Arm- und Rückenlehne
Artikelnr.: 78701700

HMV: 04.40.03.2046

134,90 € inkl. MwSt



Weitere Hilfsmittel rund ums Bad finden Sie auch in unserem Sanivitakatalog und unserem Griffeprospekt

Dusch- Toilettenrollstuhl 5" Räder:

Mit Eimer und Fußstützen. In Sitzbreiten 38, 45, 50 oder 55 cm. Außenbreite 49, 56, 61 oder 66 cm nach Sitzbreite.

Lässt sich ohne Eimer über die meisten WCs fahren. Durch Pulverbeschichtung und Edelstahlkugellager für die Verwendung in durchgeflisten Duschen geeignet.

Bedienung der Bremse nur von hinten durch Begleitperson. Nicht zum Selbstfahren geeignet.

Belastbar bis 150 kg bei Sitzbreite 38 - 50 cm
Bei Sitzbreite 55 cm - 200 kg



Mobilex - Kakadu
HMV: 18.46.01.2025

ab 490,- € inkl. MwSt
(je nach Sitzbreite)

Dusch- Toilettenrollstuhl mit 24" Antriebsrädern:

Mit Eimer und Fußstützen. In Sitzbreiten 38, 45, 50 oder 55 cm. Außenbreite 57, 64, 69 oder 74 cm nach Sitzbreite.

Lässt sich ohne Eimer über die meisten WCs fahren.

Durch Pulverbeschichtung und Edelstahlkugellager für die Verwendung in durchgeflisten Duschen geeignet.

Bedienung der Bremse durch den Patienten ist möglich. Zum Selbstfahren geeignet. Belastbar bis 150 kg bei Sitzbreite 38 - 50 cm
Bei Sitzbreite 55 cm - 200 kg



Mobilex - Kakadu
HMV: 18.46.01.0027

ab 740,- € inkl. MwSt
(je nach Sitzbreite)