

Bad & WC Hilfen



Toilettenstuhl feststehend:

Feststehender Toilettenstuhl
mit Eimer.
Sitzhöhe einstellbar 50 - 64 cm
Belastbar bis 130 kg.

Drive Medical - TS130
Artikelnr.: 530100100

HMV: 33.40.04.0016

130.- € inkl. MwSt



Toilettenstuhl fahrbar:

Mit Eimer und Fußstützen.
Außenbreite 58 cm.
Lässt sich ohne Eimer über
die meisten WCs fahren.
Bedienung der Bremse nur von
hinten durch Begleitperson.
Kaum zum Selbstfahren geeignet.
Belastbar bis 130 kg.

Drive - Medical - TRS 130
Artikelnr.: 530100000

HMV: 18.46.02.0058



199.- € inkl. MwSt

Toilettensitzerhöhung:

Wird auf die Keramik aufgelegt und
seitlich festgeklemmt. Entfernung der
vorhandenen Deckel / Brille ist nicht
notwendig. Erhöht das WC um 10 cm.
Belastbar bis 200 kg.

Russka -
Toilettensitzerhöhung 10 cm mit Deckel
Artikelnr.: 17525000

69.- € inkl. MwSt HMV: 33.40.01.0096



Toilettenhilfen



Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen:

Nach Entfernung der vorhandenen Deckel / Brille wird die Toilettensitzerhöhung in den vorhandenen Löchern fest verschraubt. Lässt sich in drei Höhen einstellen 8, 12, 15 cm. Belastbar bis 120 kg.

Drive - TSE 120 mit AL ArtikelNr.: 520500400

170.- € inkl. MwSt HMV: 33.40.01.3035
inkl. Lieferung und Montage

Badewanneneinsteigegriff:

Wird auf den Badewannenrand aufgesteckt und seitlich festgeklemmt. Klemmweite 8,5 - 13 cm. Erleichtert das Übersteigen des Wannenrandes. Aufrichten aus der Liegeposition ist damit nicht möglich. Nur von oben zu belasten. Belastbar bis ca. 100 kg.

Russka - Einsteigehilfe Deluxe Plus
ArtikelNr.: 78072000

79.- € inkl. MwSt HMV: 04.40.05.0XXX



Duschklapsitz:

Zum Kleben oder verschrauben bei Bedarf. Klebstoffreste können bei Demontage rückstandslos entfernt werden. Belastbar bis 130 kg.

Delficare - Varioporto ArtikelNr.: 70000

233,90 € inkl. MwSt
HMV: 04.40.03.0035

Montagepauschale für erstes Hilfsmittel: **75,- €** inkl. MwSt
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und Positionierung aller zu montierende Griffe / Duschklapsitz.

Montage jedes weiteren Hilfsmittels: **20,- €** inkl. MwSt



Duschhocker rund:

Passt in fast alle Duschen wegen seinen geringen Abmessungen.
Sitzfläche: 38 cm
Gesamtbreite: 38,5 cm
Höhe 3x verstellbar: 45, 50, 55 cm
Belastbar bis 180 kg.

Drive Medical - Delphi
Artikelnr.: 540100000



89.- € inkl. MwSt HMV: 04.40.03.1XXX



Duschhocker mit Armlehnen

Dusche sollte min. 90 x 90 cm groß sein.
Sitzfläche: 40 cm
Gesamtbreite: 52,5 cm
Sitzhöhe: 46 - 53 cm
Belastbar bis ca. 120 kg.

Dietz - 9402-A Artikelnr.: 411223

129.- € inkl. MwSt HMV: 04.40.03.1007

Duschstuhl:

Duschstuhl mit Arm - und Rückenlehne.
Dusche sollte min. 90 x 90 cm groß sein.
Sitzfläche: 40 cm
Gesamtbreite: 52,5 cm
Sitzhöhe: 46 - 53 cm
Belastbar bis ca. 120 kg.

Dietz - 9401-A Artikelnr.: 411222

HMV: 04.40.03.2010

139.- € inkl. MwSt



Duschhocker / Duschstuhl

Dusch- Toilettenrollstuhl 5“ Räder:



Mit Eimer und Fußstützen.
Sitzbreite 45 oder 50 cm.
Außenbreite 56 / 61 cm nach Sitzbreite.
Lässt sich ohne Eimer über die meisten WCs fahren.
Durch Pulverbeschichtung und Edelstahlkugellager für die Verwendung in durchgeflisten Duschen geeignet.
Bedienung der Bremse nur von hinten durch Begleitperson.
Nicht zum Selbstfahren geeignet.
Belastbar bis 150 kg.

Mobilex - Kakadu
HMV: 18.46.03.1050

439,- € inkl. MwSt

Dusch- Toilettenrollstuhl mit 24“ Antriebsrädern:

Mit Eimer und Fußstützen.
Sitzbreite 45 oder 50 cm.
Außenbreite 64 / 69 cm nach Sitzbreite.
Lässt sich ohne Eimer über die meisten WCs fahren.
Durch Pulverbeschichtung und Edelstahlkugellager für die Verwendung in durchgeflisten Duschen geeignet.
Bedienung der Bremse durch den Patienten ist möglich.
Zum Selbstfahren geeignet.
Belastbar bis 150 kg.

Mobilex - Kakadu HMV: 18.46.03.0041

629,- € inkl. MwSt



Weitere Hilfsmittel rund ums Bad finden Sie auch in unserem Sanivitakatalog und unserem Griffeprospekt

Dusch- Toilettenrollstühle

Badewannenbrett: HMV: 04.40.02.0016

Zum Auflegen auf den Badewannenrand.

Zum Duschen in der Badewanne.

Oberkörperstabilität notwendig.

Erleichtert das Einsteigen, da man sich seitlich auf das Brett setzt und im Sitzen die Beine über den Wannenrand heben kann

während man sich auch am wandseitigen Griff festhält.

Außenlänge 74,5 cm. Innenverstellmaß 43 - 68 cm. Belastbar bis 150 kg.



Drive Medical - Benny 74,5 cm Artikelnr.: 550100200 **54,90 €** inkl. MwSt

Badewannendrehstuhl: HMV: 04.40.02.3010

Zum Auflegen auf den Badewannenrand.

Zum Duschen in der Badewanne.

Der Badewannensitz kann aufgrund der Arm- und Rücklehne auch bei Oberkörperinstabilität verwendet werden. Der Einstieg wird dadurch erleichtert, weil man sich an den Armlehnen festhalten kann, während man sich rückwärts auf den Drehstuhl setzt.

Nach Betätigung des Auslösehebels lässt sich der Sitz um 90° drehen, sodass man im Sitzen die Beine über den Wannenrand heben kann.

Sitzbreite 40 cm.

Außenmaß 70 - 84 cm.

Belastbar bis 120 kg.



Dietz - Bano Artikelnr.: 000118 **198.- €** inkl. MwSt

Badewanneneinhängesitz mit / ohne Rückenlehne:

Zum Auflegen auf den Badewannenrand.

Der Badewanneneinhängesitz kann, falls mit er mit Rückenlehne ausgestattet ist, auch bei Oberkörperinstabilität verwendet werden.

Wir raten generell von diesem Hilfsmittel ab!

Das Ein- / Aussteigen muß weiterhin im stehen erfolgen, ohne dass der Einhängesitz dabei eine Hilfe bietet.

Das Aufstehen wird auch nicht wesentlich erleichtert da er dafür zu tief hängt. Um mit dem Sitz baden

zu können hängt er jedoch zu hoch und somit ist nur duschen möglich ist. Um zu duschen gibt es jedoch bessere Hilfsmittel.

Sitzbreite 41 cm. - Gesamthöhe ohne Rückenl. 25,5 cm.

Aussenmaß 71,6 - 87,6 cm. - Einstellmaß innen 47,5 - 63,5 cm.


Belastbar bis 120 kg.



Dietz - 9403-B mit Rückenlehne **149,90 €** inkl. MwSt

Dietz - 9403-A ohne Rückenlehne **115,90 €** inkl. MwSt

mit RL HMV: 04.40.02.2007 - ohne RL HMV: 04.40.02.1006

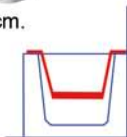

Badewannenhilfen

Badewannenlifter:

Steht mit Saugnäpfen auf dem Wannensboden. Auch bei Oberkörperinstabilität möglich da mit Rückenlehne. Zum Baden in der Wanne. Funktioniert mit Akkus in der Handsteuerung und separatem Ladegerät. Fährt auf Knopfdruck hoch und runter und Verstellung der Rückenlehne ist in der untersten Position auch möglich. Erleichtert das Einsteigen da man sich seitlich auf den Lifter setzt und im Sitzen die Beine über den Wannensrand heben kann während man sich an der Rückenlehne anlehnt. Lässt sich leicht in 2 Teile à ca. 5 kg zerlegen zum herausnehmen und reinigen.

Passt in ca. 90% aller Wannen in Standardform. Sie verlieren ca. 6cm an Wannenhöhe und ca. 10 - 15 cm an Wannenslänge. Belastbar bis 140 kg.



Video

HMV: 04.40.01.0054

Drive Medical - Bellavita G2 Artikelnr.: 465100100

699.- € inkl. MwSt

Badewannenlifter aufblasbar:

Steht mit Saugnäpfen auf dem Wannensboden.

Nicht bei Oberkörperinstabilität möglich da ohne Rückenlehne. Zum Baden in der Wanne.

Funktioniert mit Akkus in dem separatem Pumpaggregat und separatem Ladegerät.

Fährt auf Knopfdruck rauf und runter. Erleichtert das Einsteigen da man sich rückwärts auf den Lifter setzt und im Sitzen die Beine über den Wannensrand heben kann. Passt in ca. 90% aller Wannen in Standardform.

Sie verlieren ca. 2 cm an Wannenhöhe und nichts an Wannenslänge.

Belastbar bis 150 kg.

Mangar - Komfort Badekissen

keine Kassenleistung

1199.- € inkl. MwSt



Video



Badelifter



müller

Orthopädietechnik

Zentrale Fürth Poppenreuth

Alte Reutstraße 117

90765 Fürth

Tel : 0911 / 979 460

Fax: 0911 / 979 4633

Filiale Nürnberg Süd

Allersberger Str. 85

Tel: 0911/ 469 358

Filiale Erlangen

Sedanstr. 2

Tel: 09131 / 978 990

Filiale Nürnberg Ost

Äußere Sulzbacher Str. 122

Tel: 0911 / 51 93 004

Filiale Zirndorf

Im Pinderpark 7a

Tel: 0911 / 609 95 66

Filiale Nürnberg Erlerklinik

Kontumazgarten 19

Tel: 0911/ 89 19 69 83

Filiale Ansbach

Oberhäuserstr. 53a

Tel: 0981 / 38 29



Sanitätshaus



Orthopädie-
Schuhtechnik



Rehatechnik



Orthopädie-
technik



Treppenlift



Barrierefreies
Wohnen